



Made in Italy

🕒 1 ML IN 2,5 MIN*

MAGICCARE

IL VERO BENESSERE

HEALTHCARE AT HOME



DISPOSITIVO MEDICO PER AEROSOLTERAPIA MEDICAL DEVICE FOR AEROSOL THERAPY

- **Con pratico vano porta accessori**
With practical accessory compartment
- **Massima efficacia terapeutica in tutto il tratto respiratorio** / For the best therapeutic efficacy on the entire respiratory tract
- **Nuova ampolla dotata di sistema "DRUGSAVER" e con micronizzazione testata TÜV (EN 13544-1)**
New nebulizer with "DRUGSAVER" system, particle size tested by TÜV (EN 13544-1)
- **Con mascherina pediatrica e adulto**
With adult and child mask



MISTRAL PLUS

* Valore approssimativo riscitrato con soluzione fisiologica NaCl 0,9% / Approximate value obtained with saline to NaCl 0,9%

**• CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES**

Mod.: P0106EM F400

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione)
Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)

Alimentazione/Potenza: Power supply/Power:	230 V ~ 50 Hz/130 VA Other voltages available on request
Filtraggio aria: Air filtering:	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)
Portata aria al compressore: Compressor air output:	9 l/min (approx.)
Pressione Max: Max pressure:	1,8 ± 0,3 bar 1.8 ± 0.3 bar
Rumorosità (a 1 m): Sound level (at 1 m):	57 dB (A) (approx.)
Dimensioni: Dimensions:	18 (L) x 30 (P) x 12 (H) cm 18 (length) x 30 (width) x 12 (height) cm.
Peso apparecchio: Handset Weight :	1,5 Kg 1.5 Kg
Conforme alla direttiva 93/42 CEE e successivi aggiornamenti (solo per unità 230 V ~ 50 Hz): In compliance with Dir. 93/42/EEC and subsequent updates (for the 230 V ~ 50 Hz unit only):	 0051
Omologazioni: Approvals:	 Type Approved For Model P0106EM F400
Garanzia: Warranty:	2 ANNI Please refer to your local dealer



- 1 Nuova ampolla dotata di sistema "DRUGSAVER" e con micronizzazione testata TÜV / New nebulizer with "DRUGSAVER" system, particle size tested by TÜV**
- 2 Boccaglio / Mouthpiece**
- 3 Nasale pediatrico / Child nasal prong**
- 4 Mascherina pediatrica in morbido PVC medicale / Child mask in soft medical PVC**
- 5 Mascherina adulto in morbido PVC medicale / Adult mask in soft medical PVC**
- 6 Aria depurata con filtraggio di tipo professionale / Air purified by a professional filter**
- 7 Ampio vano porta accessori / A wide accessory compartment**
- 8 Pratico vano raccogli cavo sul fondo dell'apparecchio / Practical cable compartment on the bottom of the unit**

**• CARATTERISTICHE TECNICHE DI NEBULIZZAZIONE
NEBULISATION TECHNICAL FEATURES**

Nebulizzatore RF8 / RF8 nebuliser


Erogazione Delivery	0,40 ml/min (approx) 0.40 ml/min (approx)	
MMAD	4,48 µm 4.48 µm	Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta. In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.
Frazione respirabile < 5 µm Breathable fraction < 5 µm (FPF)	55,5 % 55.5 %	
Capacità massima Maximum fill volume	8 ml	

**MISTRAL
PLUS**

Codice Code SC68P00
Imballo Master carton n° 6 Pz
6 pieces



Nuovo sistema "DRUGSAVER" per limitare la dispersione del farmaco
New "DRUGSAVER" system to limit the dispersion of the drug

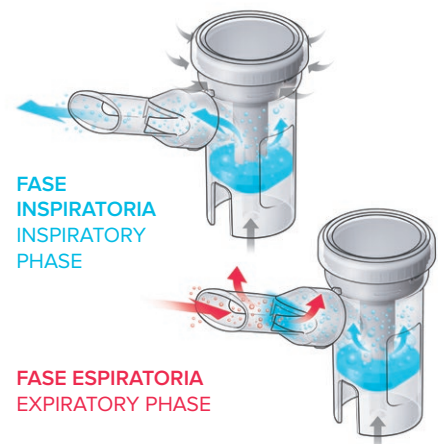

T7497 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2017 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

**MISTRAL
PLUS**

MAGICCARE

è un marchio registrato di proprietà di
is a registered trademark owned by

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) - ITALY
Phone (39)0309910168 - Fax (39)0309910287
E-mail: info@flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato. Company with certified quality system.

www.flaemnuova.it