



140x36 mm

# MAGICCARE

IL VERO BENESSERE

HEALTHCARE AT HOME



## SFIGMOMANOMETRO DA BRACCIO ARM BLOOD PRESSURE MONITOR

PULSARMATIC

- Semplice, automatico, preciso  
Simple, automatic, accurate
- Grande display per facile lettura  
Easy-to-read large display area
- Indicatore di battito cardiaco irregolare  
Irregular hearthbeat detection
- 60 memorie / 60 memories
- Morbida custodia antigraffio  
Scratchproof soft case

**• CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES**

<b>Principio di funzionamento:</b> Measurement method:	<b>**Novità: Tecnologia MWI / New MWI Technology</b> IHB Rilevazione dell'Aritmia IHB Irregular Heart Beat detection function
<b>Alimentazione con batterie:</b> DC Power source:	<b>6 Vdc - 4 Batterie alcaline AAA da 1,5</b> 6 Vdc - Four AAA Alkaline batteries
<b>Alimentazione esterna (opzionale):</b> AC Power source (optional):	<b>Alimentatore 230 V - 6 Vdc (400 mA) optional</b> 230 V - 6 Vdc (400 mA) Optional power supply
<b>Range di misura:</b> Measurement zone:	<b>Pressione 0 - 300 mmHg</b> <b>Pulsazioni 40 - 199 battiti/minuto</b> Pressure 0 - 300 mmHg Pulse 40 - 199 beats/minute
<b>Memorie / Results stored:</b>	<b>60 (un canale) / 60 (one zone)</b>
<b>Circonferenza bracciale adattabile:</b> Arm circumference:	<b>da 24 a 36 cm</b> from 24 to 36 cm
<b>Dimensioni:</b> Dimensions:	<b>Circa 180 (L) × 100 (P) × 42 (H) mm</b> About 180 (length) x 100 (width) x 42 (height) mm
<b>Peso (senza batterie):</b> Weight (without batteries):	<b>345 g</b>
<b>Conforme alla direttiva 93/42 CE:</b> In compliance with Dir. 93/42/CE:	<b>CE 0123</b>
<b>Garanzia:</b> Warranty:	<b>2 ANNI</b> Please refer to your local dealer

Borsello  
Pochette


Batterie / Batteries  
(4xAAA-6V)



Bracciale  
Arm cuff (22-32 cm)

Apparecchio  
Unit


**• DISPLAY**

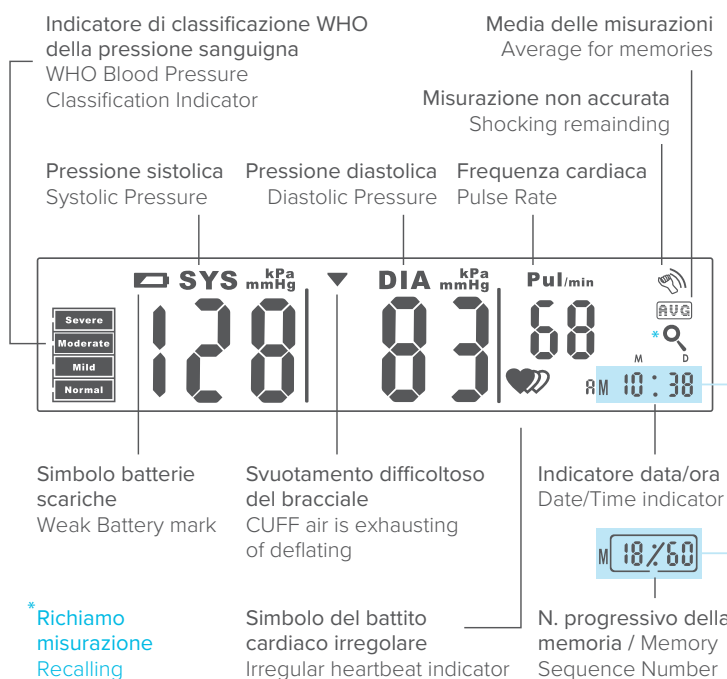


**\*\*Novità: Tecnologia MWI / New MWI Technology**

Prima che il bracciale cominci a gonfiarsi, l'apparecchio individua il livello di gonfiaggio appropriato all'individuo, rendendo quindi comoda e precisa la misurazione. Before the cuff starts to inflate, the appliance detects the inflation level suitable for the individual, thereby making measurement comfortable and precise.

Pressione / Pressure (mmHg)

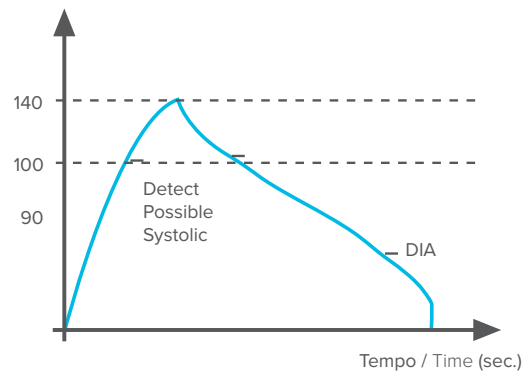

**PULSARMATIC**

Codice / Code	SFG58	
Imballo Master carton	n° 12 Pz 12 pieces	

15117A0 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2019 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

**PULSARMATIC**

**MAGICCARE**

è un marchio registrato di proprietà di  
is a registered trademark owned by

FLAEM NUOVA S.p.A.  
Via Colli Storici, 221-223-225  
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA  
(Brescia) - ITALY  
Phone (39)0309910168 - Fax (39)0309910287  
E-mail: info@flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato. Company with certified quality system.

[www.magiccare.it](http://www.magiccare.it)