

MAGIC CARE®

Il vero benessere
Healthcare at Home

Minipulsar

Sfigmomanometro da polso / *Wrist blood pressure monitor*

- Semplice, automatico, preciso
Simple, automatic, accurate
- Grande display per facile lettura
Easy-to-read large display area
- 60 memorie
60 memories
- Custodia rigida inclusa
Inclusive of rigid case



Caratteristiche tecniche Technical features

Tecnologia: Technology:	MWI (Measuring While Inflating technology) simile a Fuzzy Logic
Alimentazione con batterie: DC Power source:	3 Vdc - 2 Batterie alcaline AA da 1,5 3 Vdc - Two AA Alkaline batteries
Range di misura: Measurement zone:	Pressione 30 - 280 mmHg Pulsazioni 40 - 199 battiti/minuto Pressure 30 - 280 mmHg Pulse 40 - 199 beats/minute
Memorie Results stored:	60 (un canale) 60 (one zone)
Dimensioni: Dimensions:	7,3 x 7,3 x 6,5 mm 7.3 x 7.3 x 6.5 mm - 7.08 x 3.93 x 1.65 inches
Peso (senza batterie): Weight (without batteries):	0.300 Kg 0.300 Kg - 12.17 oz
Conforme alla direttiva 93/42 CE In compliance with Dir. 93/42/CE	CE 0123
Garanzia: Warranty:	2 ANNI Please refer to your local dealer


Tecnologia / Technology

Novità: Tecnologia MWI

Prima che il bracciale cominci a gonfiarsi, l'apparecchio individua il livello di gonfiaggio appropriato all'individuo, rendendo quindi comoda e precisa la misurazione.

New MWI Technology

Before the cuff starts to inflate, the appliance detects the inflation level suitable for the individual, thereby making measurement comfortable and precise.

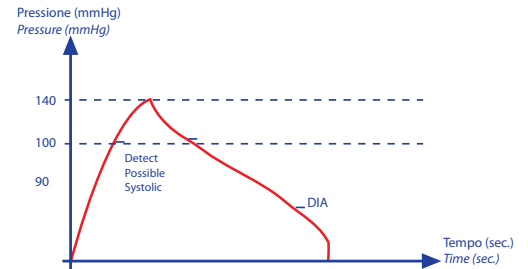

Strumento di massima precisione clinicamente validato in conformità ai protocolli:
High precision device clinically validated in compliance with protocols:

ESH
European Society of Hypertension

Dotazione accessori / Accessories contents




Custodia rigida
Rigid Case

Bracciale 22 - 32 cm
Cuff 22 - 32 cm (8.75-12.5 inches)

Display

Gonfiaggio / Sgonfiaggio
del Bracciale
Inflating / Deflating of Cuff

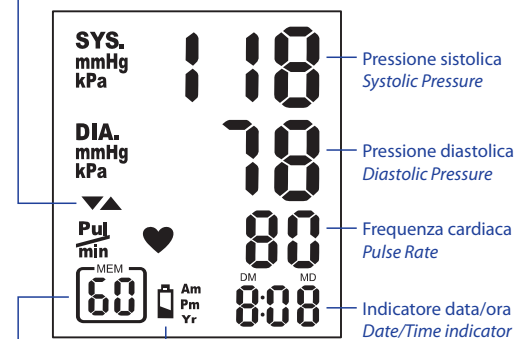

N. progressivo memoria
Memory Sequence

Simbolo batterie scariche
Weak Battery mark

MINIPULSAR

Codice
Code

SFG59

Imballo
Master carton

n° 12 Pz
12 pieces



Maggiori informazioni sui prodotti Magic Care sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.flaemnuova.it
For further information on Magic Care products please contact our sales network or visit our website www.flaemnuova.it

MAGIC CARE

è un marchio registrato di proprietà di
FLAEM NUOVA S.p.A.

Distributore/Distributor
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia
(BS) - Italy



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Export Department of **FLAEM NUOVA**



3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769 - Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com